NATIONAL GEOGRAPHIC KiDS

20×-os SZTEREÓMIKROSZKÓP



HU **Használati útmutató**

Cikkszám: 9119000

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

NATIONAL GEOGRAPHIC™

HU **Használati útmutató**

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LETÖLTÉSE:

www.bresser.de/P9119000

MIKROSZKÓP ÚTMUTATÓ:

www.bresser.de/guide

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A MIKROSZKÓPRÓL:

www.bresser.de/faq

KÍSÉRLETEK:


www.bresser.de/downloads


NATIONAL GEOGRAPHIC™




(HU) FIGYELEM! Fulladásveszély – apró alkatrészek. Apró alkatrészek – FULLADÁSVESZÉLY! 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas!

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

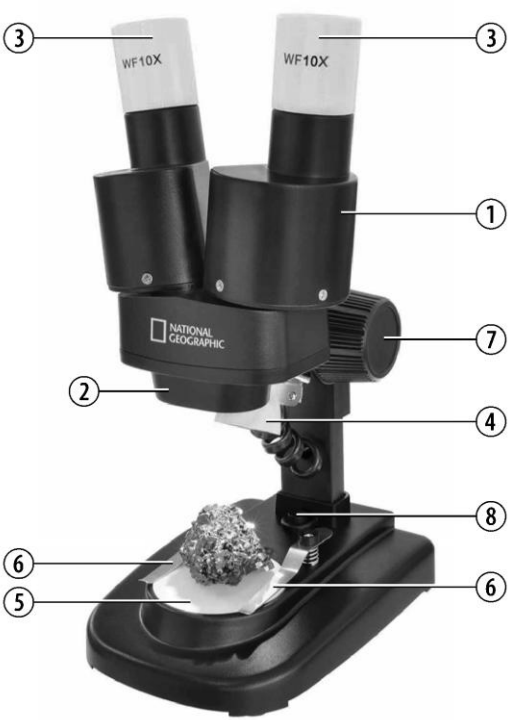

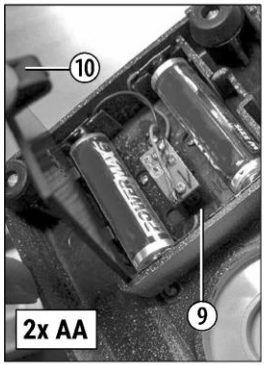



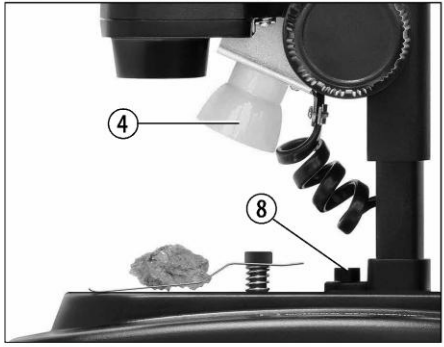

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

NATIONAL GEOGRAPHIC

Általános figyelmeztetés

- **Fulladásveszély –** Ez a termék olyan apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek! Ez fulladásveszélyt jelent.
- **Áramütés veszélye –** Ez a készülék elektronikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek áramforrásról (elemekről) működnek. A készüléket kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használja; ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- **Tűz-/robbanásveszély –** Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. Kizárólag az ajánlott elemeket használja. Ne zárja rövidre a készüléket vagy az elemeket, és ne dobja azokat tűzbe! A túlzott hőhatás vagy a nem megfelelő kezelés rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhat!
- **Vegyi égési sérülés veszélye! –** Ügyeljen az elemek helyes behelyezésére. A lemerült vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Szükség esetén viseljen megfelelő védőkesztyűt.
- A kifolyó elemsav vegyi égési sérüléseket okozhat. Kerülje az elemsav bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Érintkezés esetén az érintett területet azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Kizárólag az ajánlott elemeket használja. A gyenge vagy lemerült elemeket mindig teljes kapacitású, új elemekből álló komplett készletre cserélje. Ne használjon különböző márkájú vagy típusú, illetve eltérő kapacitású elemeket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vagy az elemek lemerültek, vegye ki az elemeket a készülékből!
- A hagyományos, nem újratölthető elemeket soha ne töltse újra. Ez a töltés során robbanást okozhat.
- Az újratölthető akkumulátorokat felnőtt felügyelete mellett kell tölteni.
- Az akkumulátorokat töltés előtt ki kell venni a játékból.
- Az elemérintkezőket nem szabad rövidre zárni.
- Ne szerelje szét az eszközt. Meghibásodás esetén forduljon a kereskedőhöz. A kereskedő felveszi a kapcsolatot a szervizközponttal, és szükség esetén beküldheti az eszközt javításra.
- A készülék használatához gyakran éles eszközökre van szükség. Mivel ezek az eszközök sérülést okozhatnak, a készüléket, valamint valamennyi eszközt és tartozékot gyermekektől elzárva tárolja.
- Őrizze meg a használati útmutatót és a csomagolást, mert fontos információkat tartalmaznak.

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Alkatrészek áttekintése

1. Binokuláris betekintőfej (okulártartókkal)
2. Sztereó objektív
3. Okulárok
4. Megvilágítás (LED)
5. Tárgyasztal (tárgyasztalbetéttel)
6. Tárgyrögzítő kapcsok
7. Fókuszállító gomb
8. Be-/kikapcsoló (megvilágítás)
9. Elemtartó rekesz
10. Elemtartó rekesz záróretesze
1. 1. Ásványminták

A készülék helyének kiválasztása

Használat előtt válasszon megfelelő helyet a mikroszkóp számára. Fontos, hogy a megfigyeléshez megfelelő megvilágítás álljon rendelkezésre, például ablak közelében vagy asztali lámpa segítségével.

Egyszerű megfigyelés

Helyezze a megfigyelni kívánt tárgyat (például egy követ) a tárgyasztal (5) közepére. Lehetőség szerint rögzítse a megfigyelni kívánt tárgyat a tárgyasztal tárgyrögzítő kapcsaival (6).

Ezután nézzen a binokuláris betekintőfejbe (1), és állítsa be az okulárok (3) közötti távolságot úgy, hogy egyetlen kör alakú, tiszta képet lásson.
A kép élességét az élességállító gomb (7) lassú elforgatásával állítsa be.

Megvilágítás

A megfigyelni kívánt tárgyak megvilágításához vegye ki mindkét okulárt (3) az okulártartókból (1), majd fordítsa meg a mikroszkópot. A mikroszkóptalpban található az elemtartó rekesz (9). Nyomja meg a záróreteszt (10), majd a fedelet ferdén kifelé húzva nyissa ki az elemtartó rekeszt.
Helyezze be a két AA elemet úgy, hogy a lapos negatív pólusok (–) a rugós érintkezőkhöz, a pozitív pólusok (+) pedig a lapos érintkezőlemezekhez érjenek.
Zárja vissza az elemtartó rekeszt a fedéllel, majd fordítsa vissza a mikroszkópot. Helyezze vissza az okulárokat. Ezután a mikroszkóptalpon található be-/kikapcsolóval (8) bekapcsolhatja a megvilágítást (4).

NATIONAL GEOGRAPHIC

Tisztítási tudnivalók

- A készülék tisztítása előtt a csatlakozódugó kihúzásával vagy az elemek kivételével válassza le a készüléket a tápellátásról.
- A készülék külső felületének tisztításához kizárólag száraz törlőkendőt használjon. Az elektronika károsodásának elkerülése érdekében ne használjon semmilyen tisztítófolyadékot.
- Óvja az eszközt a portól és a nedvességtől. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

A Bresser GmbH a vonatkozó irányelveknek és megfelelő szabványoknak megfelelően „Megfelelőségi nyilatkozatot" adott ki. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatteljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: www.bresser.de/download/9119000/CE/9119000_CE.pdf

UKCA-megfelelőségi nyilatkozat

A Bresser GmbH a vonatkozó irányelveknek és megfelelő szabványoknak megfelelően „Megfelelőségi nyilatkozatot" adott ki. Az UKCA-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el: www.bresser.de/download/9119000/UKCA/9119000_UKCA.pdf

Bresser UK Ltd. • Suite 3G, Eden House, Enterprise Way, Edenbridge, Kent TN8 6HF, Nagy-Britannia

Ártalmatlanítás

A csomagolóanyagokat típusuknak megfelelően, például papírként vagy kartonként, szakszerűen ártalmatlanítsa. A megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy környezetvédelmi hatósághoz.

Az elektronikus készülékeket ne dobja a háztartási hulladékba!

Az Európai Parlament elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelve, valamint annak német jogba való átültetése alapján a használt elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon kell újrahasznosítani.

A lemerült használt elemeket a fogyasztónak elemgyűjtő helyen kell leadnia. A 2006. január 6. után gyártott készülékek és elemek ártalmatlanításáról a helyi hulladékkezelő szolgáltatónál vagy környezetvédelmi hatóságnál kaphat további tájékoztatást.

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Az elemekre és akkumulátorokra vonatkozó előírások szerint azok normál háztartási hulladékba történő kidobása kifejezetten tilos. Kérjük, gondoskodjon a használt elemek jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanításáról – helyi gyűjtőponton vagy kereskedelmi üzletben. A háztartási hulladékba történő kidobás sérti az elemekről szóló irányelvet.

A mérgező anyagokat tartalmazó elemek jelöléssel és kémiai szimbólummal vannak ellátva.



1 az elem kadmiumot tartalmaz
2 az elem higanyt tartalmaz
3 az elem ólmot tartalmaz

Garancia és szerviz

A szokásos jótállási idő 2 év, és a vásárlás napján kezdődik. A díszdobozon feltüntetett meghosszabbított, önkéntes jótállási idő igénybevételéhez weboldalunkon történő regisztráció szükséges.

A teljes jótállási feltételeket, valamint a jótállási idő meghosszabbítására és szolgáltatásainkra vonatkozó információkat a www.bresser.de/warranty_terms oldalon tekintheti meg.

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Figyelem!
A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Rendszeresen tisztítsa meg, ha szükséges cserélje ki az elemet. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje. Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Amennyiben a termék optikai rendszerében szennyeződés jelenik meg, de a használat lehetséges, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Különösen igaz ez a nagy sokk-terhelésnek kitett outdoor eszközöknél.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés: https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel: +36 20 935 5555

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

NATIONAL GEOGRAPHIC™

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

NATIONAL GEOGRAPHIC™

VÁSÁRLÁSÁVAL EGY JÓ ÜGYET TÁMOGAT

Minden vásárlás hozzájárul a globális nonprofit National Geographic Society támogatásához, amely felfedezés, kutatás és oktatás révén segíti világunk megóvását és jobb megismerését.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT LÁTOGASSON EL A NATGEO.COM/INFO OLDALRA

© National Geographic Partners LLC. Minden jog fenntartva. A NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS és a Yellow Border Design a National Geographic Society védjegyei, felhasználásuk engedéllyel történik.

Látogasson el weboldalunkra: *kids.nationalgeographic.com*

BRESSER

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede, Németország

www.bresser.de
info@bresser.de

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way, Edenbridge,
Kent TN8 6HF, Nagy-Britannia

A tévedések és a műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Ezt a használati útmutatót a Leitz-Hungária Kft. fordította.